
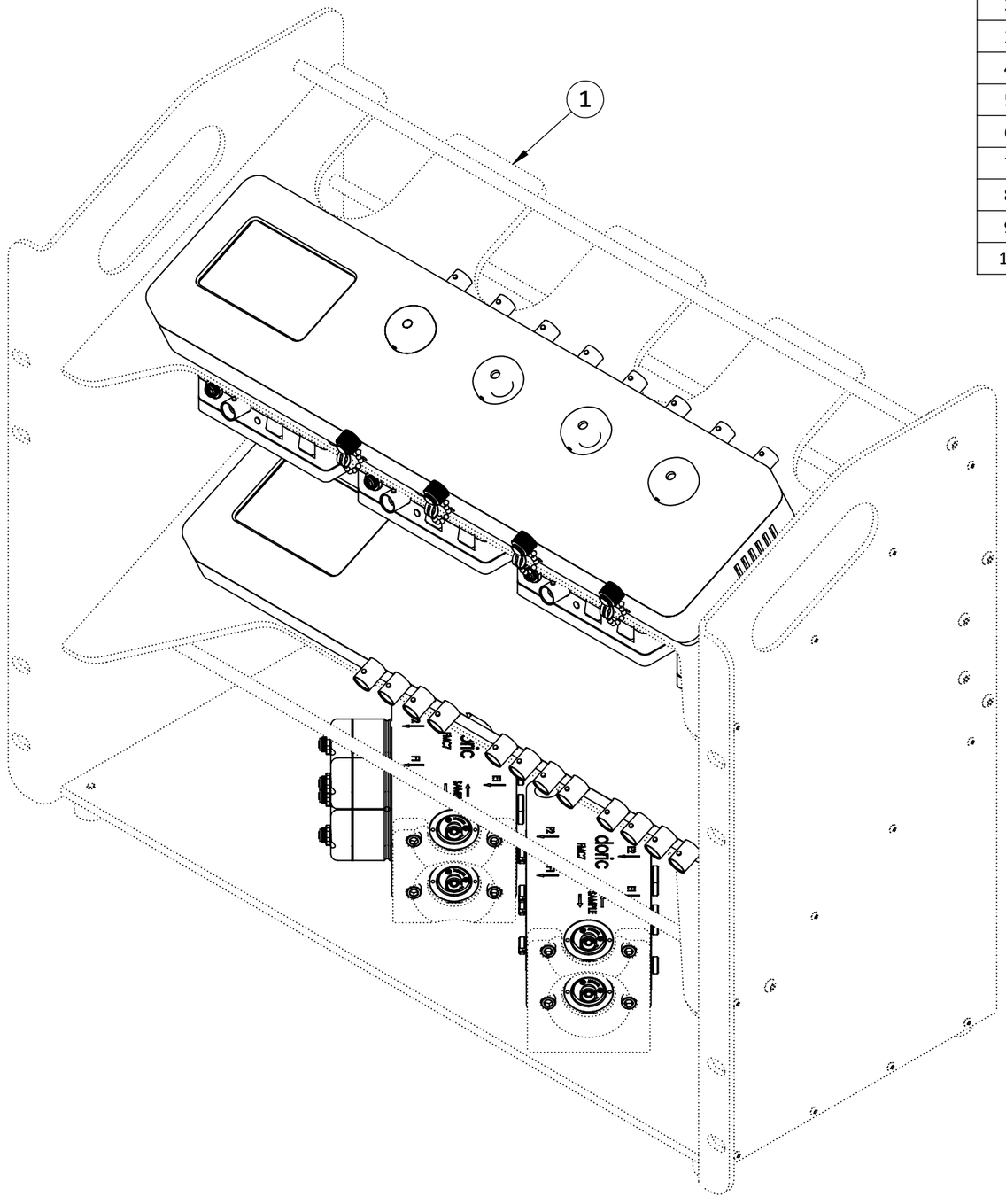


Tableau BOM				
ARTICLE #	QTE	N° PIÈCE	RÉV	DESCRIPTION
1	1	D460-0102	04	PR_7 Rack de photométrie par fibre optique
2	7	F800-4135		Entretoises en nylon non filetées, 1/2" de diamètre extérieur, 1/4" de long, noires, MCMASTER 90176A155
3	7	F700-1163		SHCS_0.2500-28_0.7500L_SS_304, MCMASTER 92196A321
4	4	F800-4052	03	Rack de photométrie - Plaque de montage FDA
5	8	F700-1015		SHCS_8-32_0.7500L_SS_304, MCMASTER 92196A197
6	8	F700-6004		RONDELLE _NO-8 _0.1690-ID _0.3040-OD _0.0300THK _SS _304
7	8	F700-1120		SHCS_4-40_0.3125L_SS_304, MCMASTER 92196A107
8	4	F800-4034	02	RACK DE PHOTOMÉTRIE - PLAQUE FRONTALE À MONTAGE RAPIDE
9	12	F700-1107		SHCS_8-32_0.5000L_SS_304, MCMASTER 92196A194
10	14	F700-1156		SHCS_0.2500-20_0.5000L_SS_304, MCMASTER 92196A537

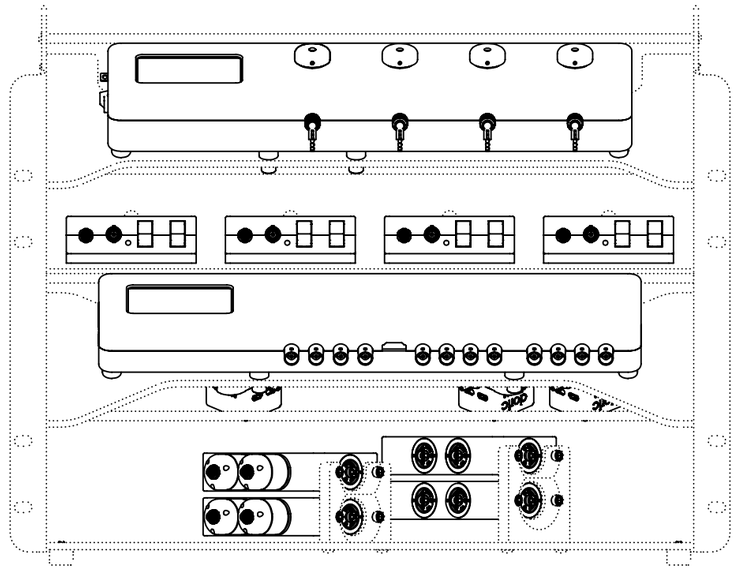

FICHE DE MONTAGE :
- SUIVRE LES ÉTAPES 1 À 5 FACILITERA LE MONTAGE DES COMPOSANTS
- CHOISISSEZ ENTRE LES ÉTAPES 2.1 OU 2.2 SELON VOS BESOINS

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

L'INFORMATION CONTENUE DANS CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDIT.

SAUF SPÉCIFICATION CONTRAIRE :

LES DIMENSIONS SONT EN MM

ANGULAIRE : ±0.25 deg
UNE DÉCIMALE 0,2 ±
DEUX DÉCIMALES 0,10 ±
COTES À TROIS DÉCIMALES 0,050 ±

INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE TOLÉRENCEMENT SELON:


MATÉRIAU: S/O

FINITION: N/D

NE PAS METTRE LE DESSIN À L'ÉCHELLE

	NOM	DATE
DESSINÉ		
VÉRIFIÉ		
ING. APPROB.		
FAB. APPROB.		
A.Q.		

Projection en troisième angle :

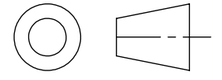

doric
357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada, Tél : 418 877 5600


TITRE :


PR_7 RACK DE PHOTOMÉTRIE PAR FIBRE OPTIQUE
- FEUILLE DE MONTAGE

FORMAT	N° DE DESSIN	RÉV
B	D460-0102-MS	01


POIDS : N/D

FEUILLE 1 SUR 7

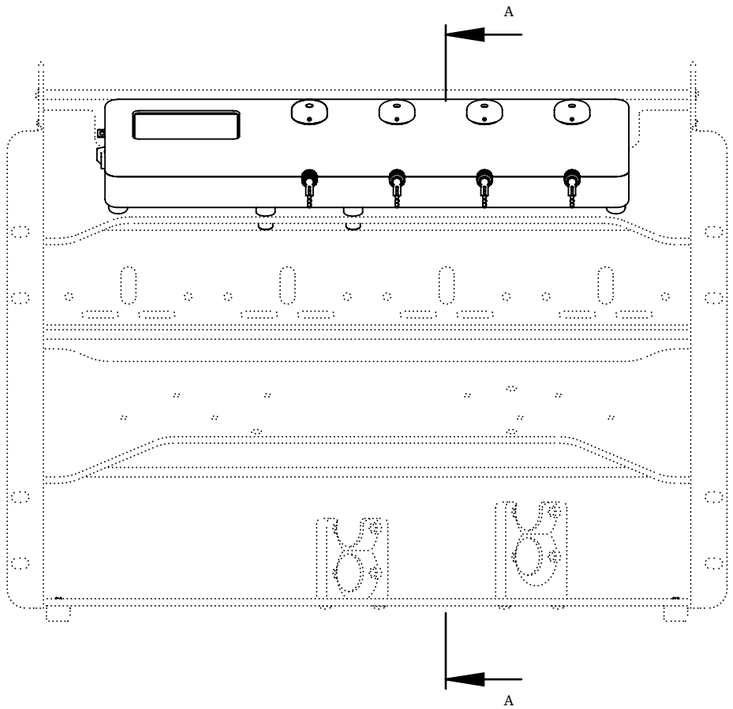

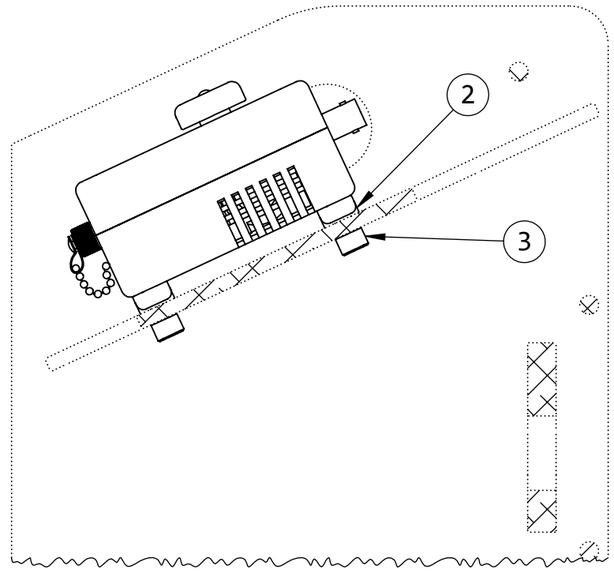

COUPE A-A
ÉCHELLE 1 : 2

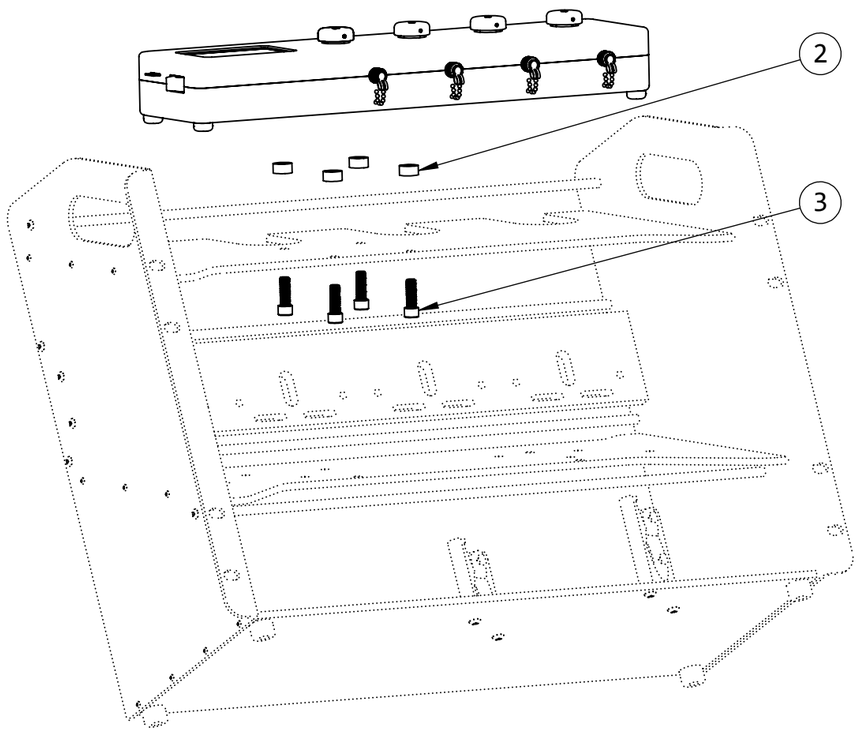

ÉTAPE 1 :

- PLACEZ LES ENTRETOISES ENTRE L'ÉTAGÈRE ET LA CONSOLE POUR ÉVITER LA FLEXION LORS DU SERRAGE DES VIS
- MONTER LA CONSOLE SUR L'ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE LE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDITE.

SAUF INDICATION CONTRAIRE :

LES DIMENSIONS SONT EN MM

ANGULAIRE : 0.25 deg
UNE DÉCIMALE APRÈS LA VIRGULE 0,2
DEUX DÉCIMALES APRÈS LA VIRGULE 0,10
TROIS DÉCIMALES APRÈS LA VIRGULE 0,050

INTERPRÉTER GÉOMÉTRIQUE TOLÉRANCEMENT SELON :


MATIÈRE
S/O

FINITION
s/o

NE PAS METTRE LE DESSIN À L'ÉCHELLE

	NOM	DATE
DESSINÉ		
VÉRIFIÉ		
APPROV. INGÉN.		
APPROV. FAB.		
A.Q.		

Projection du troisième angle :

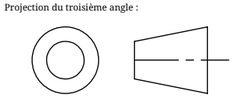



doric
357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada, Tél. : 418 877 5600

TITRE :
PR_7 Bâti de photométrie par fibres optiques
- FEUILLE DE MONTAGE


FORMAT	N° DE PLAN	REV
B	D460-0102-MS	01

POIDS : s/o

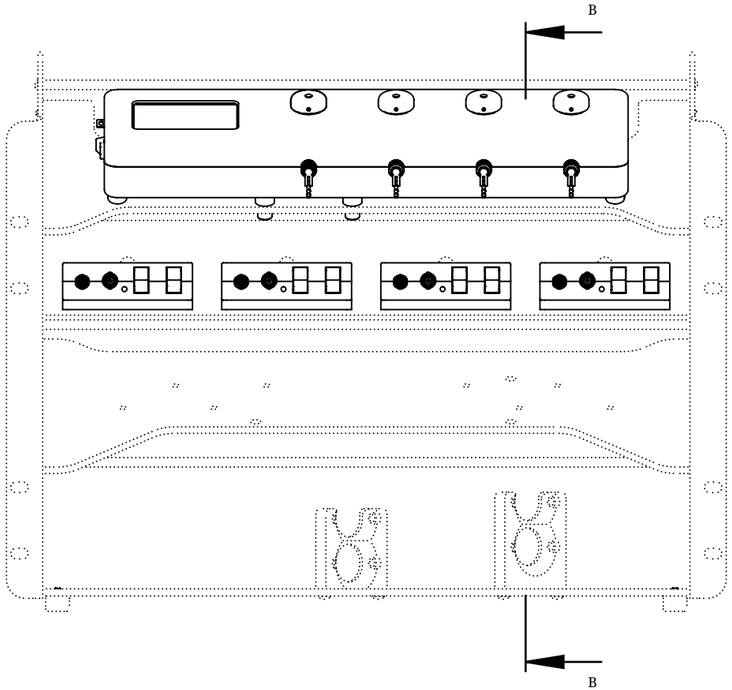


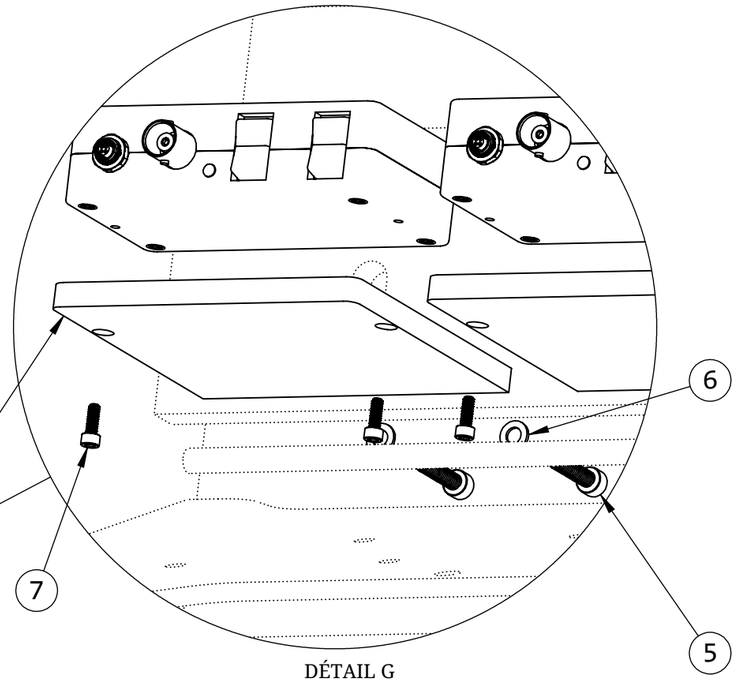

DÉTAIL G
ÉCHELLE 1 : 1,5

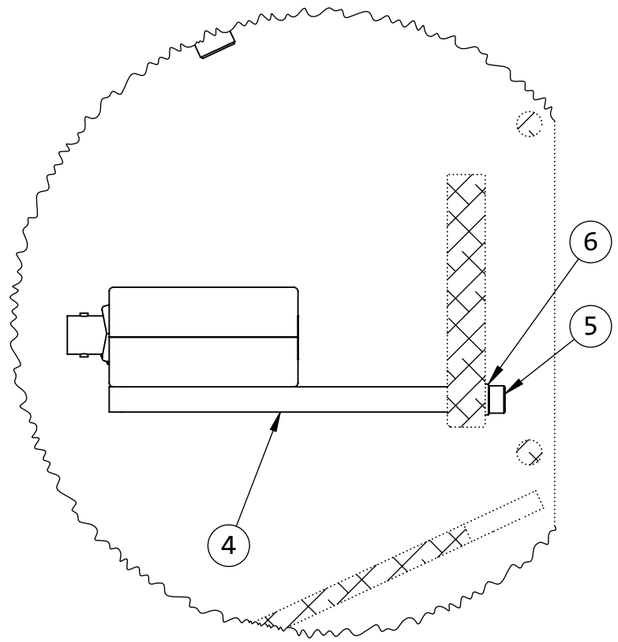

COUPE B-B
ÉCHELLE 1 : 1,5

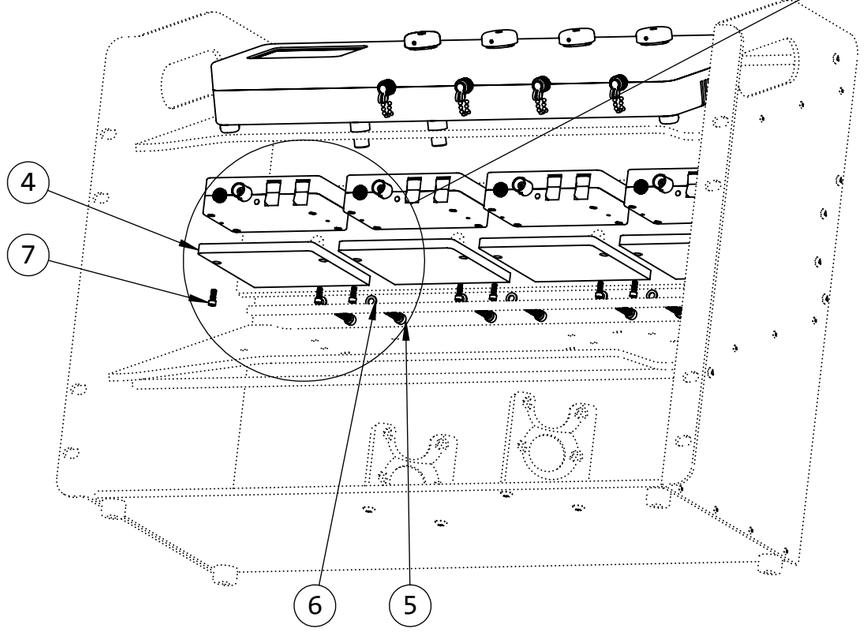

ÉTAPE 2.1 :

- MONTER LE FDA SUR LA PLAQUE DE MONTAGE DU FDA DE LA DROITE VERS LA GAUCHE EN MAINTENANT ÉCRAN DE CONSOLE DEGAGÉ POUR CONSULTATION

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**. TOUTE REPRODUCTION, EN PARTIE OU DANS SON INTÉGRALITÉ, SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDITE.

SAUF SPÉCIFICATION CONTRAIRE :		NOM	DATE
LES DIMENSIONS SONT EN MM	DESSINÉ		
ANGULAIRE: ± 0.25 deg	VÉRIFIÉ		
UNE PLACE DÉCIMALE 0,2 ±	APPROB. ING.		
DEUX PLACES DÉCIMALES 0,10 ±	APPROB. FAB.		
TROIS PLACES DÉCIMALES 0,050 ±	A.Q.		
INTERPRÉTER GÉOMÉTRIQUE TOLÉRANCEMENT SELON:	Projection du troisième angle :		
MATIÈRE: S/O			
FINITION: Sans objet			
NE PAS METTRE CE DESSIN À L'ÉCHELLE			

doric
357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada, Tél: 418 877 5600


TITRE:


PR_7 Rack de Photométrie par Fibre Optique

- FICHE DE MONTAGE


FORMAT	N° DESSIN	REV
B	D460-0102-MS	01

POIDS: Sans objet

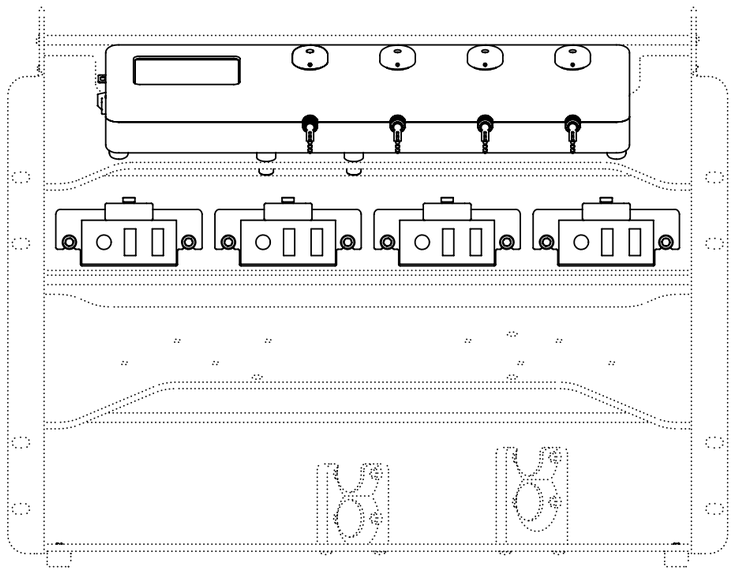

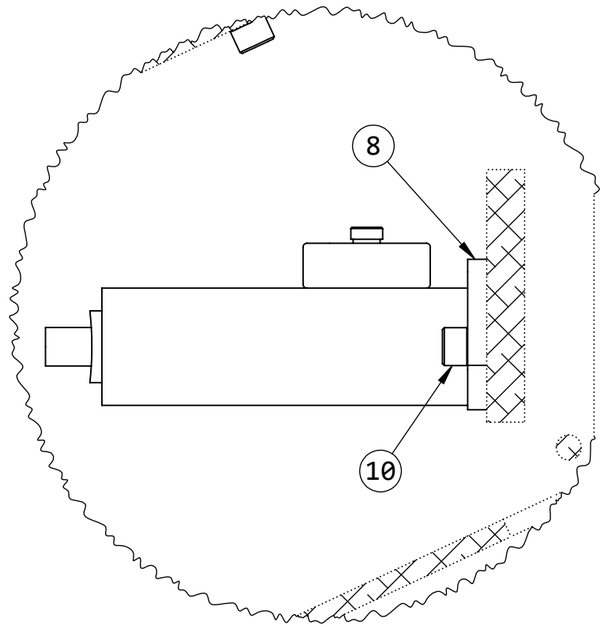

COUPE C-C
ÉCHELLE 1 : 1.5

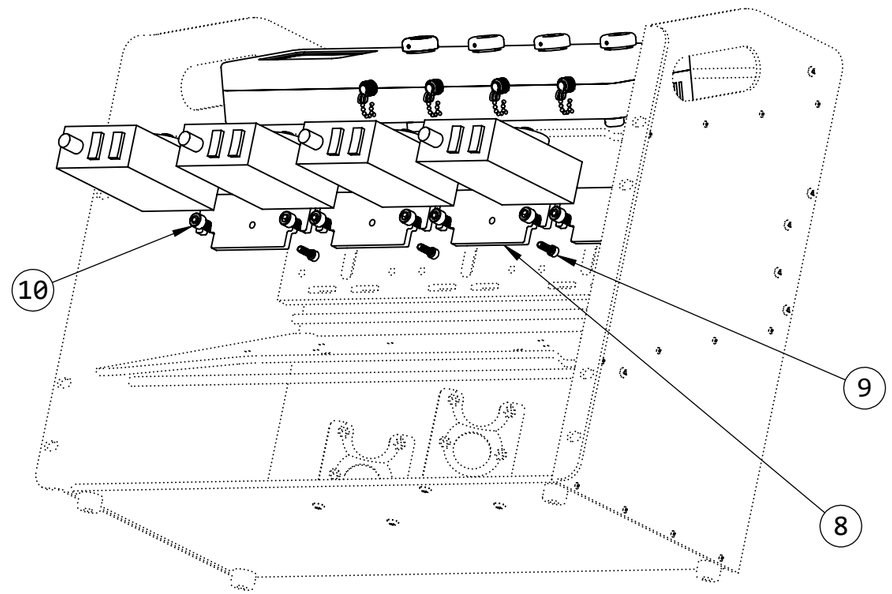

ÉTAPE 2.2 :

- PLACEZ LE PHOTORÉCEPTEUR NEWPORT
  SUR LA PLAQUE ARRIÈRE DE SUPPORT FOURNIE
- VEILLEZ À LE POSER À L'HORIZONTALE
  AVEC LA PLAQUE ARRIÈRE
- MONTEZ LE PHOTORÉCEPTEUR SUR LE BÂTI
  DE LA DROITE VERS LA GAUCHE EN MAINTENANT
  L'ÉCRAN DE LA CONSOLE DÉGAGÉ POUR LA CONSULTATION
- LE PHOTORÉCEPTEUR PEUT ÊTRE RETIRÉ FACILEMENT
  SANS RETIRER LES VIS
  POUR LE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE.

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDITE.


SAUF INDICATION CONTRAIRE :		NOM	DATE
LES DIMENSIONS SONT EN MM	DESSINÉ		
ANGULAIRE : 0,25 degrés ±	VÉRIFIÉ		
UNE DÉCIMALE 0,2 ±	APP. ING.		
DEUX DÉCIMALES 0,10 ±	APP. FAB.		
TROIS DÉCIMALES 0,050 ±	A.Q.		
INTERPRÉTER GÉOMÉTRIQUE TOLÉRANCES SELON :	Projection en troisième angle :		
MATIÈRE S/O			
FINITION N/D			
NE PAS METTRE LE DESSIN À L'ÉCHELLE			


doric
357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada, Tél. : 418 877 5600

TITRE :
PR_7 Baie de Photométrie par Fibre Optique
- FICHE DE MONTAGE


FORMAT	N° DESSIN	REV
B	D460-0102-MS	01

POIDS : N/D

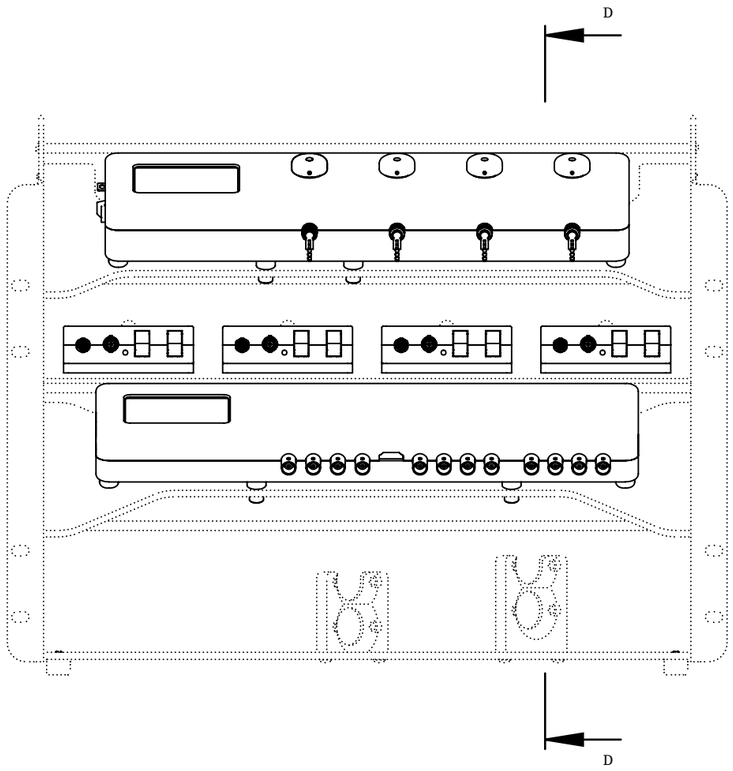

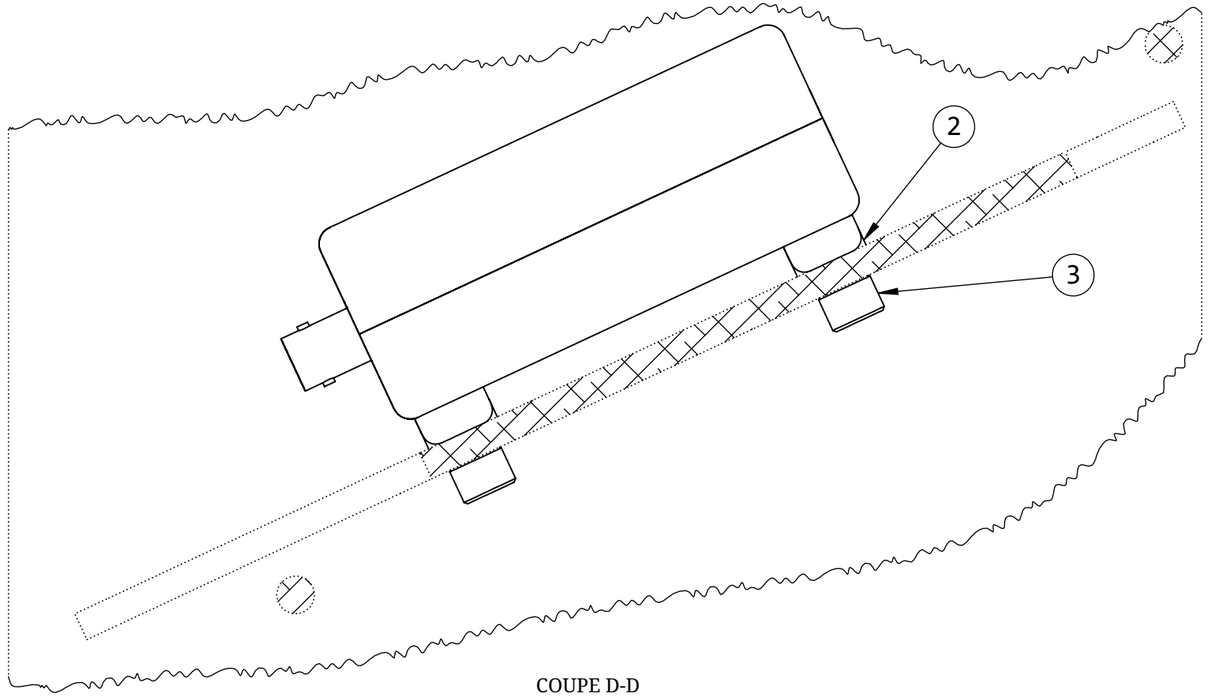

COUPE D-D
ÉCHELLE 1 : 1

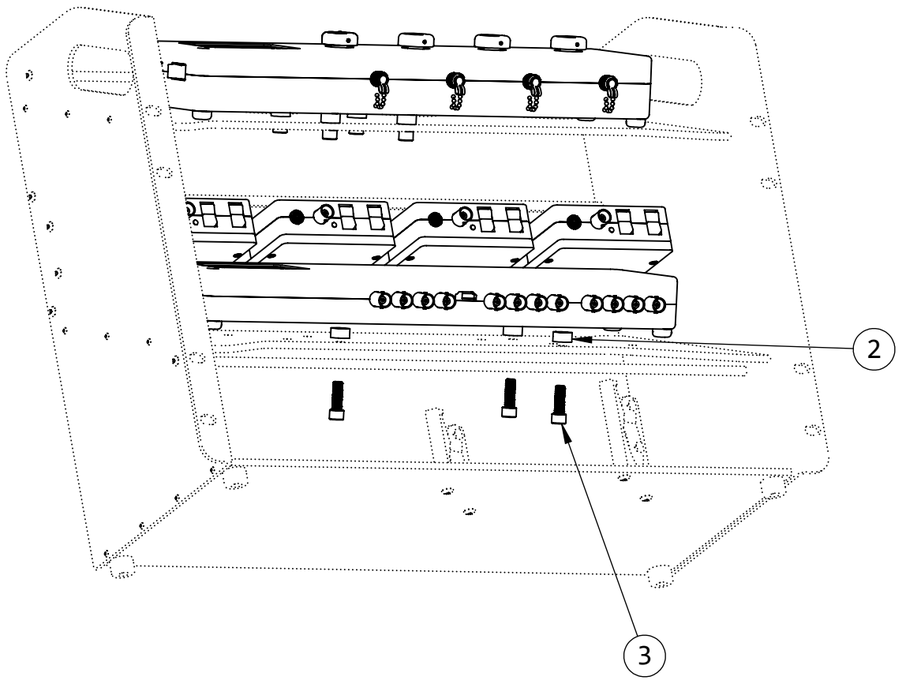

ÉTAPE 3 :

- PLACEZ LES ENTRETOISES ENTRE LA TABLETTE
  ET LE COULISSEAU POUR ÉVITER TOUTE FLEXION
  LORS DU SERRAGE DES VIS
- MONTEZ LE COULISSEAU SUR LA TROISIÈME ÉTAGÈRE

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDIT.

SAUF SPÉCIFICATION CONTRAIRE :

Dimensions en mm

Angulaire : 0,25 deg
Une décimale : 0,2 ±
Deux décimales : 0,10 ±
Trois décimales : 0,050 ±

Interpréter la cotation géométrique TOLÉRANCEMENT SELON:

MATIÈRE: S/O

FINITION: S/O

NE PAS METTRE CE DESSIN À L'ÉCHELLE

	NOM	DATE
DESSINÉ		
VÉRIFIÉ		
APPR. ING		
APPR. FAB		
A.Q.		

Projection du troisième angle :

doric
357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada, Tél : 418 877 5600

TITRE :

PR_7 Rack de photométrie par fibre optique
- FEUILLE DE MONTAGE


FORMAT: B


N° DE DESSIN: D460-0102-MS

RÉV: 01

POIDS : S/O

FEUILLE 5 SUR 7

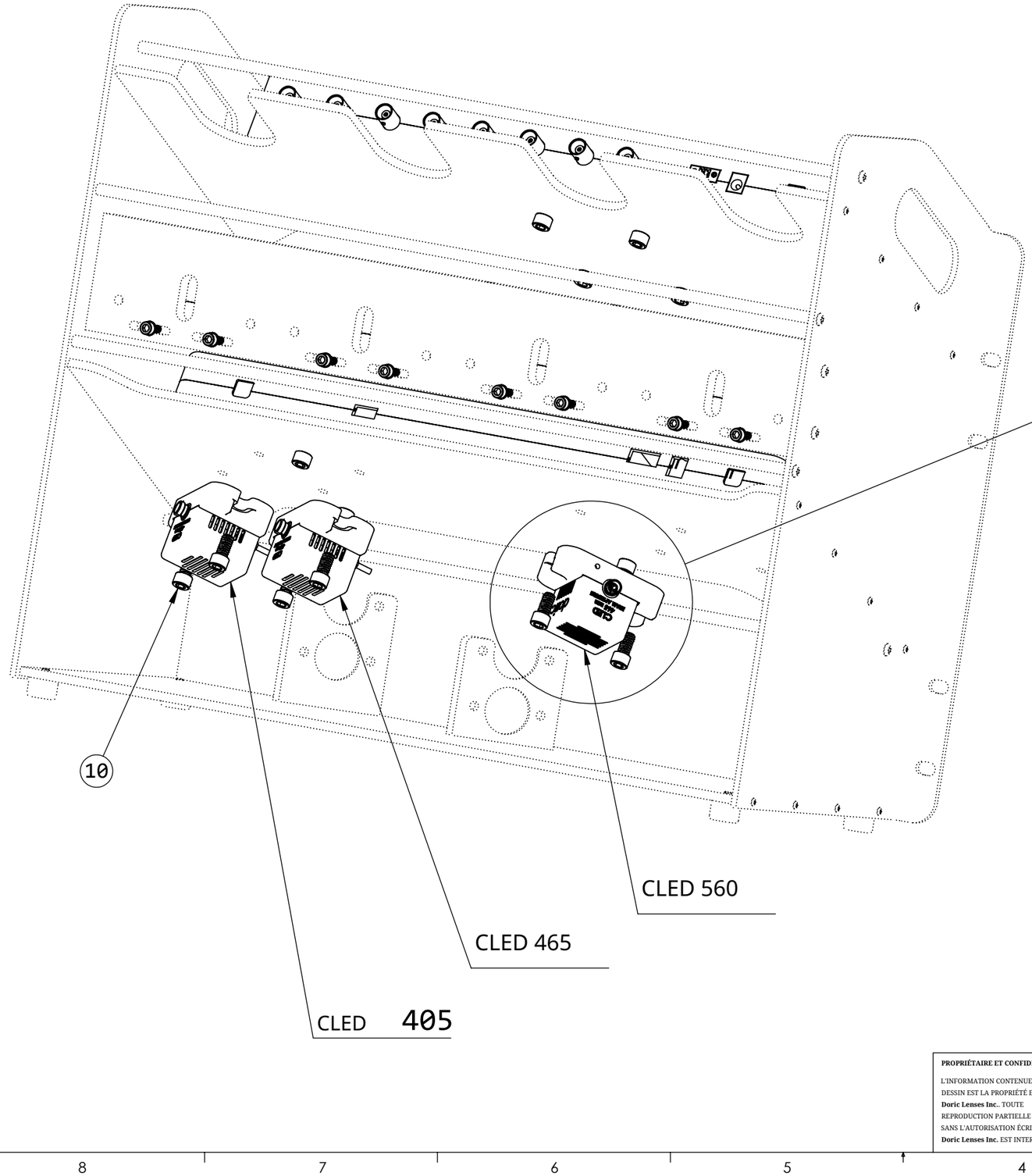

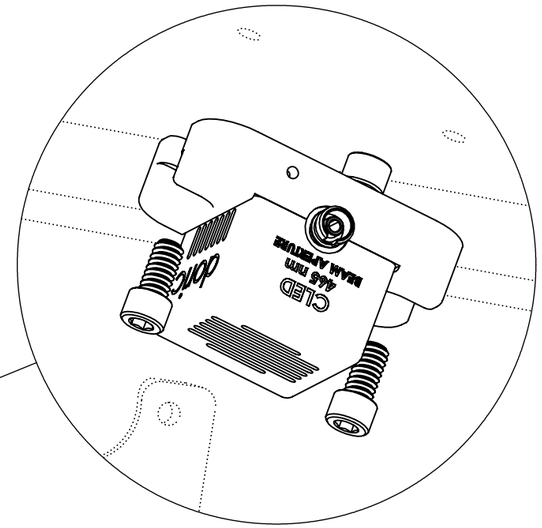

DÉTAIL E
ÉCHELLE 2 : 2,5

ÉTAPE 4 :

- Les CLED sont montés derrière la tablette centrale
- Placez la connexion de fibre optique vers l'arrière de la baie
- Placez les CLED à leur emplacement approprié en suivant les indications du schéma

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

L'INFORMATION CONTENUE DANS CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDIT.

SAUF SPÉCIFICATION CONTRAIRE :

DIMENSIONS EN MM

ANGULAIRE: ± 0.25 deg
UNE DÉCIMALE 0,2 ±
DEUX DÉCIMALES 0,10 ±
PRÉCISION À TROIS DÉCIMALES 0,050 ±

INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE DU TOLÉRANÇAGE SELON :


MATIÈRE: S/O

TERMINER: N/D

DESSIN NON À L'ÉCHELLE

	NOM	DATE
DESSINÉ		
VÉRIFIÉ		
APPR. INGÉN.		
APPR. FAB.		
A.Q.		

Projection du troisième angle :

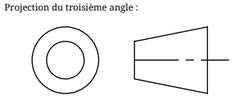

doric 357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada, Tél : 418 877 5600


TITRE:


PR_7 BAIE DE PHOTOMÉTRIE PAR FIBRE OPTIQUE - FEUILLE DE MONTAGE

FORMAT	N° DESS.	REV
B	D460-0102-MS	01

POIDS : N/D

FEUILLE 6 SUR 7

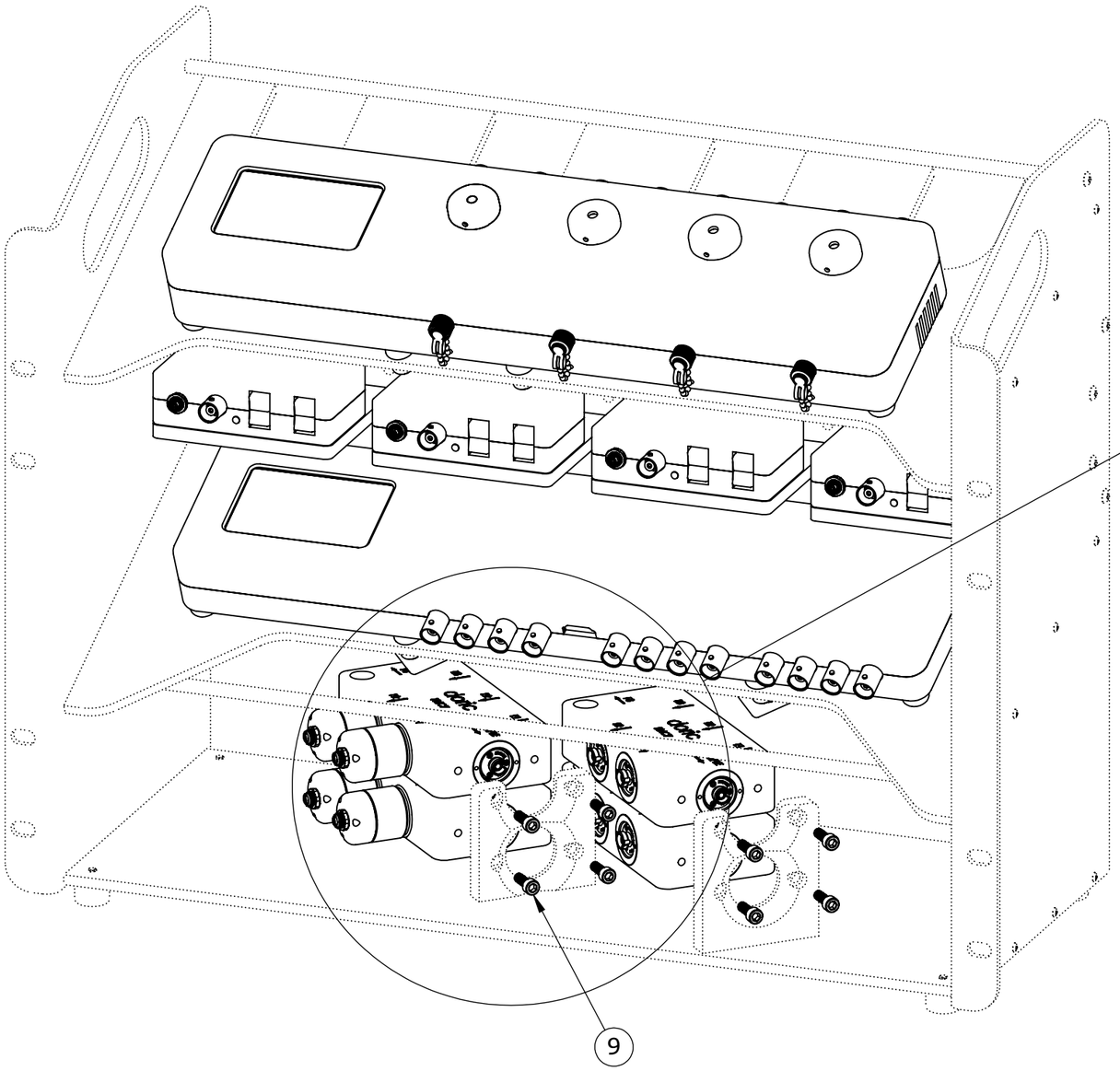

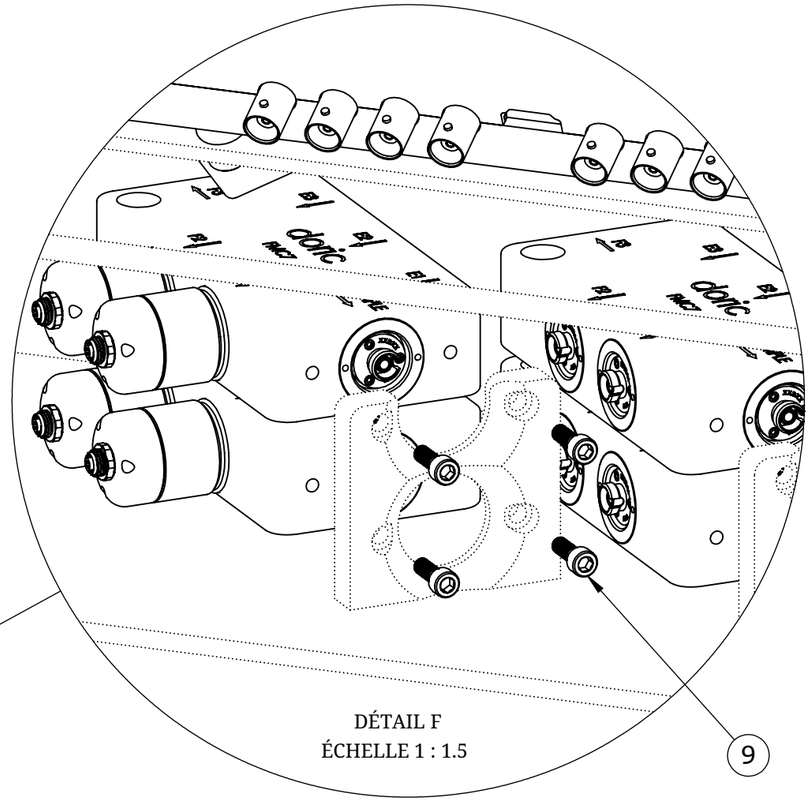

DÉTAIL F
ÉCHELLE 1 : 1.5

ÉTAPE 3 :

- MONTEZ LE FMC SUR L'ÉTAGÈRE INFÉRIEURE À L'AIDE DE LE SUPPORT DU FMC
- PLACEZ LE FMC EN RESPECTANT LES CONSIGNES CI-DESSOUS
  - EN BAS À GAUCHE
  - EN HAUT À GAUCHE
  - EN BAS À DROITE
  - EN HAUT À DROITE

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

L'INFORMATION CONTENUE DANS CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**. TOUTE REPRODUCTION, EN PARTIE OU EN TOTALITÉ SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDITE.

SAUF INDICATION CONTRAIRE :		NOM	DATE
LES DIMENSIONS SONT EN MM	DESSINÉ		
ANGULAIRE : 0.25 degré ±	VÉRIFIÉ		
UNE PLACE DÉCIMALE 0,2 ±	ING APPR.		
DEUX PLACES DÉCIMALES 0,10 ±	FAB APPR.		
TROIS PLACES DÉCIMALES 0,050 ±	A.Q.		
INTERPRÉTER GÉOMÉTRIQUE TOLÉRANCEMENT SELON:			
MATÉRIAU: S/O			
FINITION: S/O			
NE PAS METTRE À L'ÉCHELLE CE DESSIN			

Projection du troisième angle:

doric
357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada, Tél. : 418 877 5600

TITRE:

PR_7 Baie de photométrie par fibre optique
- FEUILLE DE MONTAGE

FORMAT	N° DE DESSIN	RÉV
B	D460-0102-MS	01

POIDS : S/O